

残尿測定装置 ブラダースキャナー

MD-6000



- ・ プレスキャン機能で膀胱の位置を確認できます
- ・ 膀胱形状が複雑な症例では閾値の手動修正が可能
- ・ 見やすいカラーLCDタッチパネル
- ・ 内蔵プリンターでその場で印刷できます
- ・ 患者様情報の入力ができます
- ・ データの保存及びPCへデータ転送できます
- ・ 大容量バッテリーで最長4時間稼働
- ・ 専用トロリーを標準装備
- ・ 保険適応

ブラダースキャナー MD-6000 の主な機能




画面は6.4"のカラーLCDタッチパネルです。操作がとても楽にできます。



データは、測定結果、患者様情報、エコー画像を100件まで保存可能。PCとUSB接続して、データを転送できます。

膀胱容量を自動計算

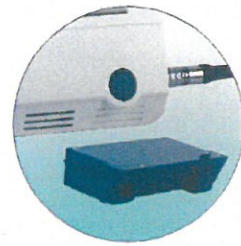

リチウムバッテリーで最長4時間稼働。バッテリー残量は画面に表示されます。



内蔵プリンター機能。画面をタッチするだけで、印刷できます。

画像イメージ



患者情報登録画面



仕様

ディスプレイ	6.4"カラーLCDタッチパネル
超音波プローブ	3Dメカニカルセクタプローブ (Bモード)
周波数	2.5MHz
測定範囲	0~999ml
精度	≤±15ml (0~100ml)、≤±15% (101~999ml)
電源	11.1Vリチウムイオンバッテリー
内臓プリンター	感熱紙 57mm×40mm×20mm
サイズ	337mm×177mm×155mm (W×H×D)
重量	2.2kg (プローブ、バッテリー含む)
認証番号	第226AABZX00129000号
診療報酬点数	検査D215-2 断層撮影法530点 (心臓超音波検査を除く) 検査D216-2-1 残尿測定検査55点 注) 残尿測定検査は患者1人につき月2回に限り算定する。

■ 標準装備品
専用トrolley

■ オプション品
キャリングケース



製造業者

 MEDA Co., Ltd

製造販売業者

 すみれ医療株式会社

販売業者

 MTF 株式会社 メディカル・タスクフォース
www.medical-taskforce.com

本社 〒550-0006 大阪市西区江之子島1-7-3奥内阿波座駅前ビル702
TEL: 06-6446-2100(代表) FAX: 06-6446-2105

東京営業所 〒134-0081 東京都江戸川区北葛西1-22-19MTビル201
TEL: 03-5659-2522 FAX: 03-5659-2556

九州営業所 〒861-8037 熊本県熊本市東区長嶺西1-6-88ザクレイン101
TEL: 080-5712-1283 FAX: 096-369-1455

札幌営業所 〒001-0034 札幌市北区北34条西6丁目1-31メゾン29-102
TEL: 080-5712-1593 FAX: 011-768-8612