

MEDICA


尿流量測定装置

# Pico Flow2



- 液晶タッチスクリーン方式
- リアルタイムで尿量曲線を表示
- メモリカードへの保存
- Siroky ノモグラム付（男性患者用）

# ウロフロメーター ピコフロー 2

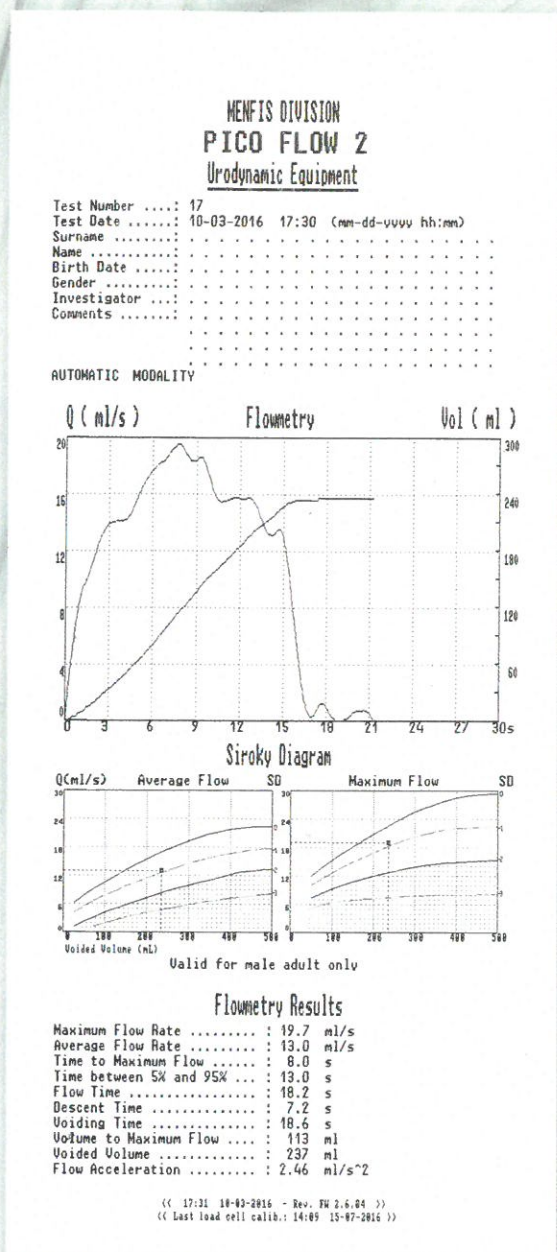

診療報酬点数  
D242 尿水力学検査 尿流測定 205点  
届出番号 13B1X00280M00001

販売業者

**MTF** 株式会社 メディカル・タスクフォース

本社 〒550-0006 大阪市西区江之子島1-7-3 奥内阿波座駅前ビル702

TEL : 06-6446-2100 (代表) FAX : 06-6446-2105

東京営業所 〒134-0081 東京都江戸川区北葛西1-22-19MTビル201

TEL : 03-5659-2522 FAX : 03-5659-2556

九州営業所 〒861-8037 熊本県熊本市東区長嶺西1-6-88 サクレイン101

TEL : 080-5712-1283 FAX : 096-385-5848

札幌営業所 〒065-0020 札幌市東区北二十条東7丁目2番37号デベックス207号

TEL : 080-5712-1593 FAX : 011-753-7261

製造販売業者

**すみれ医療株式会社**

製造業者

**MEDICA** MEDICA S.p.A

## ●仕様

測定方式	重量式
測定モード	Auto / Manual
最大測定尿量	2000ml
流量記録	0 ~ 100ml/s
測定精度	± 1%
ケーブル長	8m

## ●測定項目

- 待機時間 (Waiting Time)
- 最大尿流率 (Maximum Flow)
- 平均尿流率 (Average Flow)
- 最大尿流到達時間 (Time to Maximum Flow)
- 5%-95% 時間間隔 (Time between 5% and 95%)
- 実排尿時間 (Flow Time)
- 下降時間 (Descent Time)
- 全排尿時間 (Voiding Time)
- 最大尿流率到達時間 (Volume to Maximum Flow)
- 排尿量 (Voided Volume)
- 尿流加速度 (Flow Acceleration)

## ●Siroky ノモグラム (男性患者用)

平均尿流量率と最大尿流量率それぞれの Siroky 判定曲線が正常値とともに表示されます。  
-2SD 以下は更なる検査が必要です。

## ●オプション

男女兼用排尿チェア

Windows 用データ管理ソフトウェア (FLOWSOFT2)



標準品



オプション

※仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承下さい。